
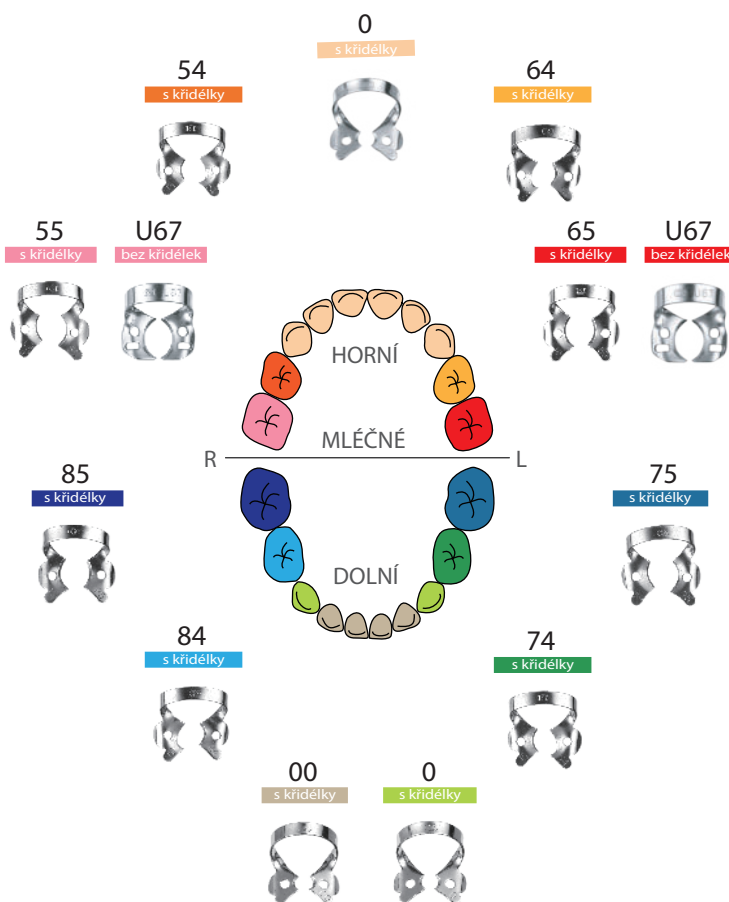


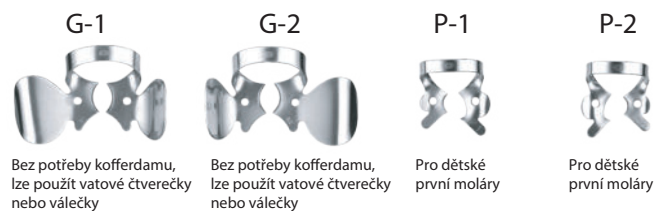

Kofferdamový set č. 8

Nerezová ocel
Velikost : 90 x 90mm

Podložka s 8 sponami: 9 x 2, 2A, W2A, 5, 56, 203 & 204 nebo organizér na 8 spon (pouze podložka)

Vyrobeno v Japonsku



Kofferdamový set č.12

Nerezová ocel
Velikost : 150 x 90mm

Podložka s 12 sponami: 210, 9, 0, 2, 2A, 206, 207, 5, 56, 7, 201 & 202 nebo organizér na 12 spon (pouze podložka)

Vyrobeno v Japonsku



Kofferdamový set č.18

Nerezová ocel
Velikost : 160 x 120mm

Podložka s 12 sponami: 210, 9, P-1, P-2, 22, 27, 29, 208, 209, 18, 138, 139, 7, 201, 202, 203, 204 & 205 nebo organizér na 18 spon (pouze podložka)

Vyrobeno v Japonsku



Dětský kofferdamový set

Nerezová ocel
Velikost : 90 x 90mm

#54-pravá horní D #64-levá horní D
#55-pravá horní E #65-levá horní E
#85-pravá dolní E #75-levá dolní E
#84-pravá dolní D #74-levá dolní D
nebo organizér na 18 spon (pouze podložka)

DENTECH CORPORATION
TEL:+81-3-3964-2011 FAX:+81-3-3962-5624
Web: www.dentech.co.jp Email: info@dentech.co.jp
53-5, Shimizu-cho, Itabashi-ku, Tokyo, 174-0053, JAPAN

DentaMAX
All-Max Made s.r.o.
Čeladná 679, 739 12
www.dentamax.cz info@dentamax.cz
tel: +420 777 244 005



Průvodce výběrem

KSK

Kofferdamových spon

LESKLÉ



ČERNÉ



MATNÉ




76 typů × 3 barvy


Proč si vybrat právě KSK Dentech spony

- ☒ KSK DENTECH Kofferdamové spony jsou vyrobeny ze speciální pružinově kalené nerezové oceli.
- ☒ Tento materiál má ideální pružnost pro spony pro kofferdam a zároveň zajišťuje maximální odolnost proti korozi.
- ☒ K dispozici je široká škála typů, takže si snadno vyberete spony přesně podle tvaru a umístění zubů.
- ☒ Spony procházejí přísnou kontrolou kvality včetně testu únavy kovu, který zaručuje optimální pružnost a dlouhou životnost.
- ☒ Pro dosažení absolutní stability a dokonalého tvaru jsou naše spony pečlivě a precizně ručně upravovány.
- ☒ Všechny čelisti jsou precizně ostřeny, aby se dokonale přizpůsobily zubům.
- ☒ Černé a matné provedení výrazně snižuje odlesky světla, chrání oči lékařů a je ideální pro fotografování.
- ☒ Všechny spony jsou vyrobeny v Japonsku.

Kompletní Kofferdamový set

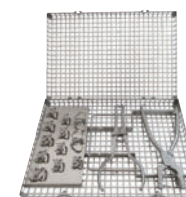


Obsah :
① Kofferdamový set č.12
② Kofferdamový rámeček
③ KSK perforační kleště
④ KSK aplikační kleště & sterilizační kazeta

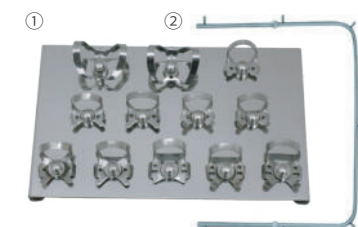

Kofferdam Starter Kit

Contents :
① Kofferdamový set č.12
② Kofferdamový rámeček
③ KSK perforační kleště
④ KSK aplikační kleště
⑤ Kofferdamová šablona
⑥ KSK Dental Dam Non-Latex (20 kusů)

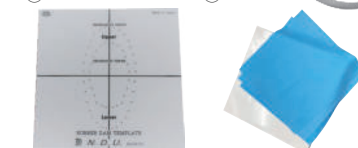



Pro horní levé moláry s plochými čelistmi v páru se sponou č. 43	Pro horní levé moláry s plochými čelistmi v páru se sponou č. 42
---	---




Oblíbená spona pro frontální úsek

Podobná sponě č. 2, s většími čelistními pro premolary

Podobná sponě č. 2T s většími čelistními pro premolary



Pro frontální úsek, špičáky a kavity na labiální ploše premolárů	Křčková spona pro ošetření labiálních kazů	Pro horní a dolní premoláry, široké čelisti pro lepší přehled
--	--	---

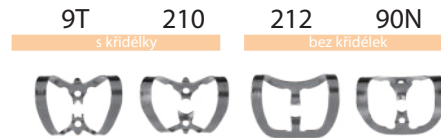

Oblíbená spona pro frontální úsek	Spona pro řezáky	Krčková spona pro ošetření labiálních kazů	Rigidní spona pro frontální úsek
-----------------------------------	------------------	--	----------------------------------



			
Spona pro frontální úsek	Oblíbená spona pro frontální úsek	Pro frontální úsek, špičky a kavity na	Podobná č. 212 s větším přítlakem na gingivu



											
Podobná sponě č. 3, ale se zanořenými čelistmi	Rigidní spona pro horní moláry	Spona pro horní moláry	Spona pro horní moláry s velmi zanořenými čelistmi	Podobná sponě č. 7, ale se zanořenými čelistmi	Spona pro částečně prořezané moláry	Spona pro částečně prořezané moláry	Spona do furkací kořene, zároveň stlačuje dásně	Spona pro prořezané horní moláry	Podobná sponě 8A, ale bez křídek	Určeno pro horní druhé moláry – kompaktní čelistní pro krčkovou oblast	Spona pro horní dolní moláry se zaoblenými čelistmi pro krčkovou oblast



									
Spona pro moláry s přístupem k distální části	Spona pro dolní moláry se zanořenými čelistmi	Spona pro částečně prořezané moláry	Spona pro malé moláry s rovnými čelistmi	Spona do furkací kořene, zároveň stlačuje dásně	Spony pro moláry s výrazným hrbkem do furkace u subgingivální oblasti. Spony č. 30 a č. 31 jsou v páru.	Spony pro moláry s výrazným hrbkem do furkace u subgingivální oblasti. Spony č. 30 a č. 31 jsou v páru.	Pro hluboké bukalní kavity molárů. Se širším okrajem na bukalní straně.	Podobná sponě 8A, ale bez křídelek	Spona pro horní a dolní moláry se zaoblenými čelistmi pro krčkovou oblast



			
Spona pro kořeny s hluboce zanořenými čelistmi	Spona pro kořeny se zanořenými čelistmi se zoubky	Spona pro krčkové kavity přemolárů se zanořenými čelistmi	Spona pro subgingivální kazy v oblasti přemolárů



						
Podobná sponě č. 207, bez křidélek	Podobná sponě č. 206, bez křidélek a se zanořenými čelistmi	Podobná sponě č. 2A, bez křidélek	Pro malé spodní moláry, v páru se sponou č. 204	Pro malé spodní moláry, v páru se sponou č. 203	Podobná sponě č. 7, ale s většími čelistmi. Pro velké moláry	Podobná sponě č. 7, a se zanořenými čelistmi



Pro horní a dolní premolary s rovnými čelistmi


Pro velké premolary s větší okrajem než spona č. 207

Podobná sponě č. 2, s většími čelistmi pro premolary

Podobná sponě č. 2T s většími čelistmi pro premolary



					
Obilbená spona pro frontální úsek	Pro dolní premolary s plochými čelistmi	Pro dolní premolary s plochými čelistmi se zoubky	Křčková spona pro ošetření labiálních kazů	Podobná sponě č. 207, bez křídelek	Pro frontální úsek, špičky a kavity na labiální ploše premolárů

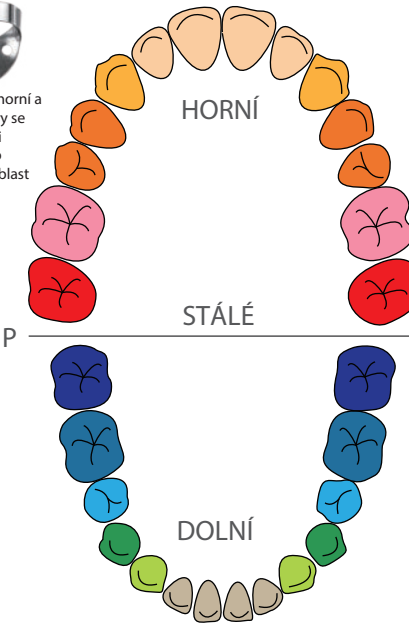

-  Obľíbená spona pro frontální úsek
-  Pro frontální úsek, špičáky a kavity na labiální ploše premolárů
-  Krčková spona pro ošetření labiálních kazů



							
Pro velké premoláry s větším okrajem než spona č. 207	Pro horní a dolní premoláry s rovnými čelistmi	Spona pro horní a dolní premoláry s vyklenutými čelistmi	Spona pro kořeny se zanořenými čelistmi se zoubky	Podobná sponě č. 207, bez křidélek	Podobná sponě č. 206, bez křidélek a se zanořenými čelistmi	Pro horní a dolní premoláry s širokými čelistmi pro lepší přehled	Pro premoláry s hluboce zanořenými čelistmi, které se zachycují pod dásni



										
Rigidní spona pro horní moláry	Spona pro horní moláry	Spona pro horní moláry s velmi zanořenými čelistmi	Podobná sponě č. 7, ale se zanořenými čelistmi	Podobná sponě č. 14 s většími čelistmi	Podobná sponě č. 3, ale se zanořenými čelistmi	Pro horní moláry se zanořenými čelistmi, stejně velká jako č. 7	Pro horní a dolní moláry s širokým okrajem	Pro hluboké buklální kavity molárů se širším okrajem na buklální straně, v páru s č. 24	Pro horní levé moláry s plochými čelistmi v páru se sponou č. 43	Pro horní levé moláry s plochými čelistmi v páru se sponou č. 42



									
Podobná spona č. 7, ale s většími čelistmi pro velké moláry	Spona pro částečně prorezané moláry	Podobná spona č. 5, se zanořenými čelistmi	Pro dolní moláry s rovnými čelistmi	Podobná spona č. 3, ale bez křídelek	Spony pro moláry s výrazným hrbolkem do furkace v subgingivální oblasti. Spony č. 30 a č. 31 jsou v páru.		Pro horní a dolní moláry. S širokým okrajem	Pro hluboké buklální kavity moláry. Se širším okrajem na buklální straně.	Rigidní spony pro moláry dlouhými čelistmi



											
Pro velké dolní moláry s plochými čelistmi	Podobná sponě č. 14 s většími čelistmi	Pro velké spodní moláry. Podobná č. 56, s většími čelistmi	Spona pro částečně prořezané moláry	Spona pro dolní moláry se zanořenými čelistmi	Pro dolní premoláry s plochými čelistmi se zoubky	Podobná sponě č. 2, s většími čelistmi pro premoláry	Podobná sponě č. 2T s většími čelistmi pro premoláry	Spona pro kořeny s hluboce zanořenými čelistmi	Spona pro kořeny se zanořenými čelistmi se zoubky	Spona pro krčkové kavity premolárů se zanořenými čelistmi	Spona pro subgingivální kaz v oblasti premolárů



								
Pro horní a dolní premolary s širokými čelistmi pro lepší přehled	Podobná sponě č. 207, bez křidélek	Podobná sponě č. 20, bez křidélek a se zanořenými čelistmi	Podobná sponě č. 2A, bez křidélek	Pro premolary s velmi zanořenými čelistmi, které se zachycují pod dásni	Pro horní a dolní premolary s rovnými čelistmi	Pro dolní premolary s plochými čelistmi	Pro malé premolary a dětské řezáky	Menší než spona č. 0. Pro frontální úsek